

CE 2195

Imagene

ROZŚWIETL DROGĘ DO WYOBRAŹNI

Wprowadzenie

Zaawansowane ulepszanie
estetyczne, odmładzanie skóry

Certyfikacja CE, GMP
i zgodność z ISO

Zatwierdzone przez
rygorystyczne badania kliniczne

Obecność
w ponad 20 krajach

Najnowsze technologie
produkcji i innowacyjne
składy

Niezaprzeczalna precyzja
i bezpieczeństwo



Dlaczego Imogene

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO

Imogene™ przechodzi skrupulatny sześciostopniowy proces produkcyjny, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa dla swojego wypełniacza HA, w tym:

Użycie surowców klasy premium;
Zastosowanie zaawansowanej technologii sieciowania;
Testy wysokiej wydajności;
Procedury po sterylizacji.

ŁATWA PROCEDURA

Imogene™ posiada innowacyjne, ergonomiczne uchwyty i popychacze zaprojektowane dla precyzyjnej i bezpiecznej aplikacji, zapewniające jednolitą siłę wstrzyknięcia, aby osiągnąć optymalne rezultaty zabiegowe.

WYSOKA JAKOŚĆ

Imogene™ jest produkowany w nowoczesnym zakładzie, spełniającym międzynarodowe standardy, w tym:

- Certyfikację CE 2195
- Dobrą Praktykę Produkcyjną (GMP)
- Certyfikację ISO 13485

DŁUGOTRWAŁOŚĆ

Technologia Hy - BRID firmy Imogene™ umożliwia tworzenie wyjątkowo gęstych i jednolicie rozmiarowych cząsteczek kwasu hialuronowego, zapewniając długotrwałe efekty objętościowe.

Technologia Hy - Brid


REWOLUCYJNE ULEPSZENIE ESTETYCZNE:

PATENT HY-BRID W WYPEŁNIACZACH KWASU HIALURONOWEGO

Patent Hy-BRID stanowi przełom w produkcji wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego, oferując innowacyjne rozwiązanie zwiększające plastyczność produktu, a jednocześnie zapewniające trwałe i stabilne efekty. Tradycyjne wypełniacze często mają problemy z niejednorodną objętością i niedokładnością wynikającą z użycia cząsteczek o nieregularnych rozmiarach, co ogranicza ich skuteczność. Hy-BRID pokonuje te wyzwania, ustanawiając nowe standardy w dziedzinie odmładzania i poprawy estetycznej.


Główną zaletą technologii Hy-BRID jest jej zdolność do osiągania optymalnej gęstości kwasu hialuronowego i jednolitych cząsteczek. Wypełniacze te charakteryzują się wyjątkową lepko elastycznością i równomiernym wchłanianiem, co zapewnia długotrwałe rezultaty bez konieczności częstych zabiegów podtrzymujących. Precyzyjna kalibracja cząsteczek kwasu hialuronowego do jednolitego rozmiaru ma kluczowe znaczenie dla uzyskania naturalnego wyglądu, umożliwiając płynne dopasowanie do różnych obszarów twarzy – od drobnych zmarszczek po głębsze ubytki objętości. Gwarantuje to harmonijny, spersonalizowany efekt, który podkreśla unikalne cechy każdego klienta.

Lepkość

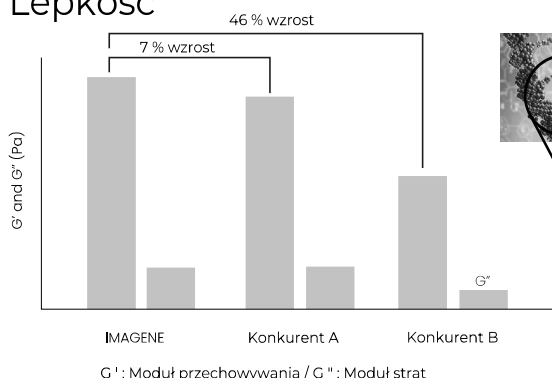

* Technologia HY - BRID

Hipersieciowanie
Oparty na kwasie hialuronowym
pochodzenia niezwierzęcego
Wolny od pozostałości
Poprawiona gęstość i elastyczność

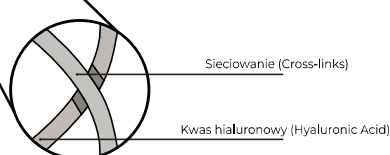

Bezpieczeństwo i Jakość

WYSOKIEJ JAKOŚCI SUROWCE

Używanie surowców najwyższej jakości, które posiadają certyfikację CE.

TEST WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Protokół testowania wydajności gwarantuje wysoką jakość w każdej partii produkcyjnej.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SIECIOWANIA

Wykorzystując zaawansowaną technologię HYBRID do ulepszonego ambiwalentnego sieciowania, poziomy BDDE (chemicznego sieciującego) są redukowane do niewykrywalnych wartości.

STERYLIZACJA KOŃCOWA

Proces sterylizacji końcowej skutecznie zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

TEST WYDAJNOŚCI IMAGENE

	STANDARD	WYNIK
WYGLĄD	Brak zanieczyszczeń, przezroczysty i bezbarwny żel	Zaliczone
STĘŻENIE HA	21.6 ~ 26.4 mg	24.1 mg
PH	6.5 ~ 7.5	7.10
RESZTKOWY BDDE	< 2ppm	Niewykrywalne
ENDOTOKSYNY	< 20 EU	< 0.100 EU
OBJĘTOŚĆ	> 1.0 mL	Zaliczone




CERTYFIKAT ISO 13485: Nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości przez cały cykl życia produktu.

OZNACZENIE CE: Spełnianie najwyższych standardów zdrowotnych, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w Europie.

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA (GMP): Gwarancja spójnej jakości na każdym etapie produkcji.

Gama produktów


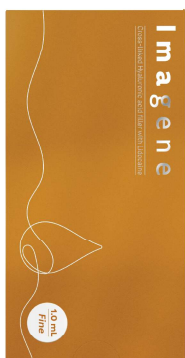


IMAGENE FINE

Zaawansowany booster w formie zastrzyku, idealny do rewitalizacji skóry. Sformułowany z czystym sieciowanym kwasem hialuronowym, występuje jako przezroczysty, bezbarwny żel całkowicie wolny od zanieczyszczeń.

IMAGENE LIFTY

Ten booster na bazie kwasu hialuronowego przeznaczony jest do konturowania i stabilizacji ust. Dzięki zaawansowanej technologii Hy-Brid zapewnia zwiększoną lekko elastyczność dla długotrwałych wyników.

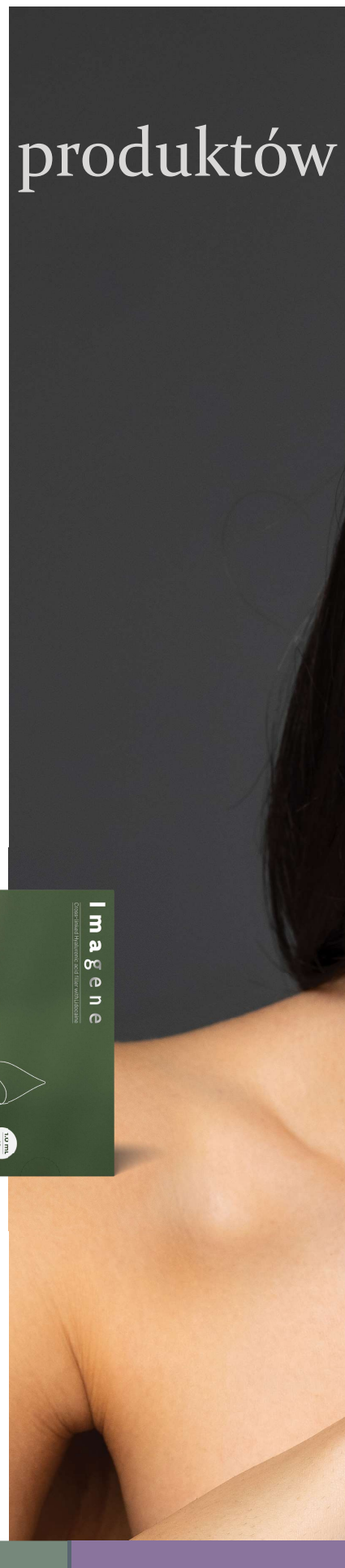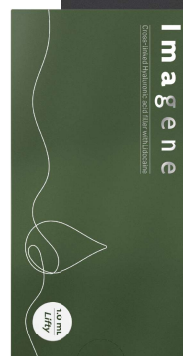





**Zawartość kwasu
hialuronowego:**
24mg/ml

**Zawartość
lidokainy**
3mg/ml

**Rozmiar
cząsteczki**
400µm

IMAGENE LIGHT


Zaawansowany booster w formie zastrzyku, idealny do rewitalizacji, bez potrzeby struktury. Daje efekt mięsistości. Sformułowany z czystym sieciowanym kwasem hialuronowym, odmładza i przywraca skórze młodzieńczą objętość.

Imagine Fine to wszechstronny żel wypełniający na bazie sieciowanego kwasu hialuronowego, zaprojektowany do odbudowy objętości skóry. Idealny do rewitalizacji ust oraz podkreślenia kontury ust.


Posiada średni rozmiar cząsteczki wynoszący 400 µm, co nadaje mu gładką i plastyczną konsystencję. Jego unikalne właściwości reologiczne zapewniają doskonałą zgodność z tkankami, dając naturalny efekt korekcyjny. Dodatek lidokainy zapewnia skuteczne znieczulenie, zwiększając komfort klienta podczas zabiegu.



Czas działania:
7-9 miesięcy

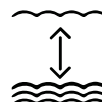

**Głębokość
implantacji :**
Powierzchnowa
skóra właściwa
Środkowa warstwa
tkanki podskórnej

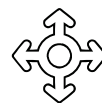

**Wskazania
(miejsca implantacji) :**
• Rewitalizacja ust

CE
2195




**Zawartość kwasu
hialuronowego:**
24mg/ml

**Zawartość
lidokainy**
3mg/ml

**Rozmiar
cząsteczki**
600µm



Czas działania:
8-10 miesięcy

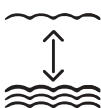

**Głębokość
implantacji :**
Środkowa do głębokiej
warstwy tkanki podskórnej



**Wskazania
(miejsca implantacji) :**
· Powiększanie ust

CE
2195

IMAGENE LIFTY




Ten Booster na bazie kwasu hialuronowego nadaje ustom mocny kontur i stabilizację. Dzięki zaawansowanej technologii Hy-BRID zapewnia zwiększoną lekko elastyczność dla długotrwałych efektów.

Imagen Lifty™ to wszechstronny żel wypełniający, stworzony z sieciowanego kwasu hialuronowego, specjalnie zaprojektowany do precyzyjnego modelowania i konturowania ust.

Rygorystyczne usunięcie środka BDDE minimalizuje ryzyko opuchlizny po zabiegu, a lidokaina zapewnia maksymalny komfort podczas aplikacji.

Charakteryzuje się optymalną gęstością i rozmiarem cząsteczki 600 µm, co pozwala na bezproblemową integrację z tkanką. Wzbogacony innowacyjną technologią Hy-BRID, oferuje gładką, łatwo rozprowadzającą się teksturę odpowiednią dla wszystkich technik, nawet tych najbardziej zaawansowanych.

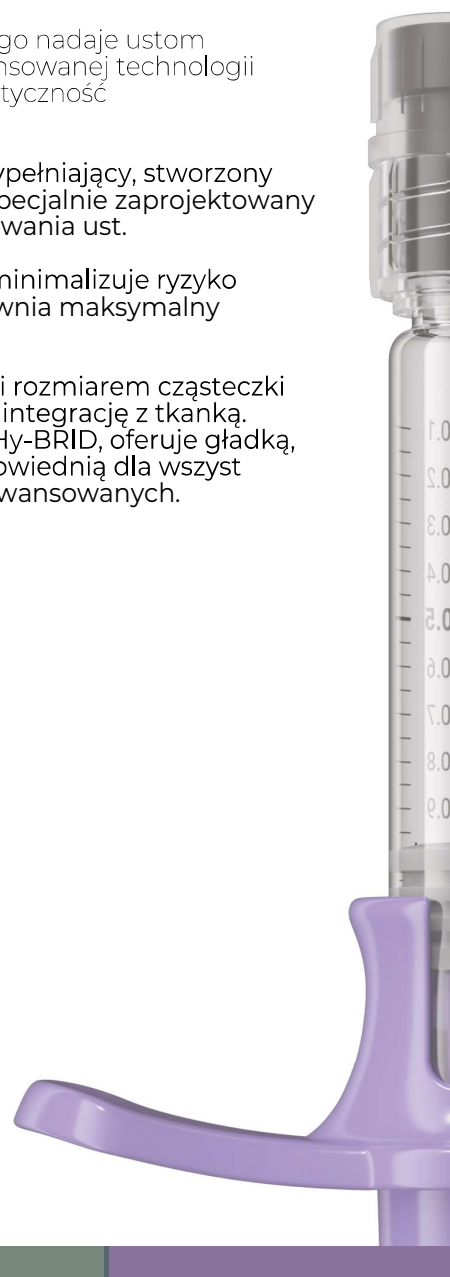


Łatwa procedura

Wyjątkowa elastyczność i doskonałe właściwości reologiczne Imagene pozwalają na łatwe i precyzyjne podanie. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt strzykawki umożliwia równomierne rozłożenie nacisku podczas iniekcji, gwarantując precyzyjne i jednolite podanie produktu.




Ultra Thin Wall (UTW)

Igła Ultra Thin Wall ma większą średnicę wewnętrzną w porównaniu do standardowych igieł. Zwiększa to przepływ i zmniejsza siłę wytlaczania podczas iniekcji.

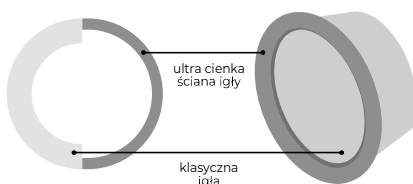

Test siły iniekcji (N)

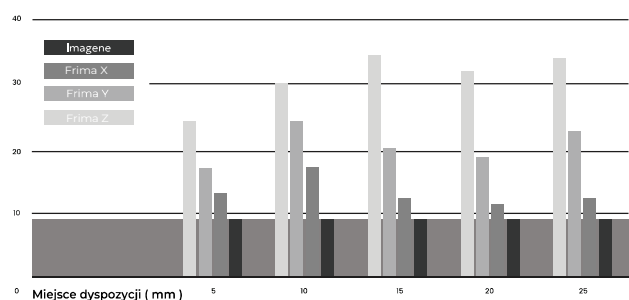

**Oficjalny Importer w Polsce
Grupa Wizmed Sp. z o.o**

KONTAKT

Telefon: +48 793 421 197

E-mail: biuro@wizmed.pl

Strona Internetowa: <http://www.remediumpolska.pl/>

